



NM-FM3P - Mascherina chirurgica



CODICE PRODOTTO

NM-FM3P

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mascherina chirurgica 3 strati, con elastici auricolari e clip nasale, di tipo IIR. Efficacia di filtrazione batterica >98%. Latex free.

Tre strati: polipropilene / carta da filtro / propilene.

DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medical, RSA, industria alimentare e Ho.Re.Ca., industria e pulizia, cosmesi ed estetica, veterinario, settore automotive, settore antiterroristico e settore dei tatuatori.

CLASSIFICAZIONE D.M.

Dispositivo Medico di classe I. Conformità al regolamento (UE) 2017/745;

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	CODICE EAN CONF SECONDARIA	TAGLIA	COLORE	NUMERO DI REPERTORIO	CND
8055719541438	8055719541445 (cartone)	Unica	Azzurro	2248998	T020604

MATERIA PRIMA

Tre strati: PP 25 g/m², carta da filtro 20 g/m² e PP 25 g/m²

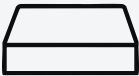
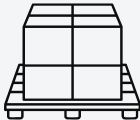
AVVERTENZE

Non Sterili. Non destinati ad essere sterilizzati prima dell'uso.
Questo prodotto è progettato per fornire protezione delle vie respiratorie contro alcune particelle e polveri nell'aria, e bloccare l'emissione di fluidi corporei.
1. Assicurarsi di utilizzare una maschera nuova ed integra. Ispezionare la maschera per individuare eventuali danni prima di ogni utilizzo.
2. Lavarsi le mani con acqua e sapone o utilizzare un disinfettante per le mani a base di alcol prima di toccare la maschera.

NORME DI RIFERIMENTO

ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari
EN ISO 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici
EN ISO 10993 Valutazione biologica dei dispositivi medici
EN ISO 15223 Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite
EN 14683 Requisiti maschere facciali uso medico (cd "mascherine chirurgiche") marcate CE (Tipo IIR)

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Pallet
	50 pezzi	2000 Pezzi (40 box)	16 Cartoni
			
	Box in cartoncino	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x200 cm

ISTRUZIONI D'USO

1. Rivolgere il lato della maschera in modo che il clip per per il naso si trovi sopra la maschera.
2. Tenere la maschera sul viso con le mani e posizionarla contro il mento.
3. Tirare gli elastici dietro le orecchie.
4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio nasale in metallo, mentre si preme verso l'interno, spostare le punte delle dita su entrambi i lati lungo il fermaglio nasale finché il fermaglio nasale non è completamente premuto nella forma del ponte del naso.
5. Non modificare o utilizzare in modo improprio la maschera.
6. Sostituire il prodotto se danneggiato.

STOCCAGGIO

Conservare al riparo da sorgenti inquinanti, calore ed umidità.
Conservare ad una temperatura tra -5°C e +35°C.

SMALTIMENTO

Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.

VALIDITÀ

5 anni dalla data di produzione

FABBRICANTE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY

LUOGO DI PRODUZIONE

Paesi Extra U.E.

IMPORTATORE

MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY

